

Instructions for use



Innovator X[®] Post-Op Elbow Brace



Life Without Limitations[®]



.....	3
ⓔⓃ Instructions for use.....	5
ⓓⓔ Gebrauchsanweisung.....	7
ⓕⓗ Guide de fabrication.....	9
ⓔⓈ Instrucciones para el uso.....	11
ⓔⓣ Istruzioni per l'uso.....	13
Ⓝⓞ Bruksanvisning.....	15
ⓓⓐ Brugsanvisning.....	17
ⓈⓋ Bruksanvisning.....	19
ⓕⓙ Käyttöohjeet.....	21
Ⓝⓕ Gebruiksaanwijzing.....	23
ⓓⓣ Instruções de Utilização.....	25

EN - Caution: This product has been designed and tested based on single patient usage and is not recommended for multiple patient use. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE- Zur Beachtung: Dieses Produkt ist für die Anwendung bei ein und demselben Patienten vorgesehen und geprüft. Der Einsatz für mehrere Patienten wird nicht empfohlen. Wenn beim Tragen dieses Produkts Probleme auftreten, sofort den Arzt verständigen.

FR- Attention: Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES- Atención: Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.





IT- Avvertenza: Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato per un singolo paziente e se ne consiglia l'impiego per più pazienti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.


DA- Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af én patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV- Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL- Opgelet: Dit product is ontworpen en getest voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT- Atenção: Este produto foi concebido e testado com base na utilização num único doente e não está recomendado para utilização em múltiplos doentes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contacto com o seu profissional de saúde.

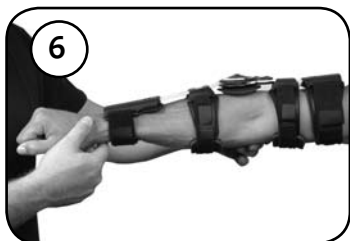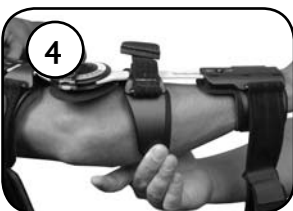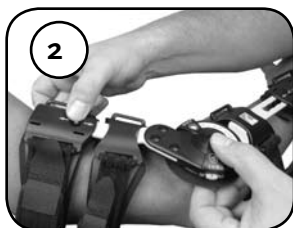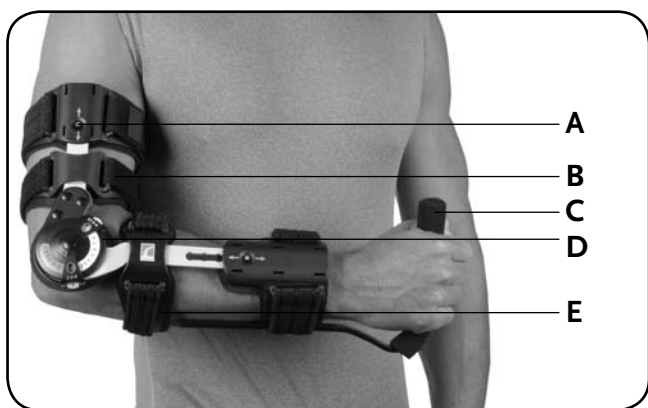

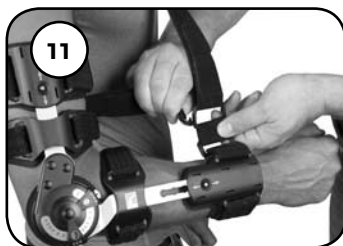

ENGLISH

USES

Controlled range of motion for post traumatic, post surgical repair of the human elbow.

CAUTION

1. For single patient use only. If you experience increased pain, swelling, sensation changes or any adverse reactions while using this product, consult your medical professional immediately.
2. Proper rehabilitation and activity modification are also essential parts of a safe treatment program.
3. Federal law prohibits this device to be sold or ordered by anyone who is not a licensed health care practitioner.

PHOTO CAPTIONS

- A. Extending struts for universal length sizing to fit both right and left arms.
- B. Non-slip padding on the proximal straps of the brace, prevents migration.
- C. Anti-Supination/Pronation handle as an optional feature.
- D. Range of motion hinge
- E. Malleable cuffs

FITTING INSTRUCTIONS

1. Assessing Length:

Locate the hinge pivot center over the lateral humeral epicondyle (outer elbow).

2. Adjusting Length:

The brace is preset to 13" length and extends fully to 17" length. To adjust length, press the button on the distal cuffs and pull the cuff away from the elbow joint to the desired length. The lower extension (ulnar side of arm) should extend up to the styloid process (the bump on the medial side of the wrist). The upper extension (humeral side of arm) should extend up to the most comfortable position at the axilla or arm pit.

3. Decreasing Length:

Press the button on the distal cuffs and push the extending cuff to achieve the desired length.

4. Bending the Cuffs:

Bend the cuffs to securely wrap around the circumference of the arm. Start with the cuffs proximal to the elbow.

5. Trimming of Straps:

Trim the strap lengths as necessary. Remove the hook piece, trim the strap and reapply the hook piece.

6. Securing the Straps:

After length and cuff circumference are determined, secure and fasten all straps, starting with the two straps closest to the elbow

7. Range of Motion Adjustment:

To adjust range of motion, press the flexion or extension button and rotate until the desired degree of flexion or extension shows through the corresponding window. Brace provides full range of motion from 0 to 120 degrees.

8. Enforced Compliance:

Loop and secure the enclosed lock ties through the hole in the flexion and extension buttons to limit range of motion adjustment.